

シンプルで使い易い卓上遠心機 Z207A


Compact Centrifuge
Z 207 A



最高回転数
6,800rpm

両方使えます！

付属のアングルロータを
2種類から選択！
幅広い用途にご使用いた
だけます。

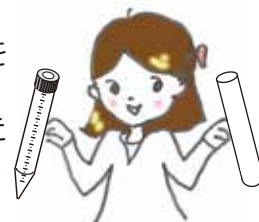

コンパクトで高性能

幅を取らない
コンパクト設計



簡単タッチキー

エルゴノミクス・
タッチ操作

手袋のままで操作可能
最新のタッチダイヤルは、
タッチするだけで簡単
コントロール！



安心の安全設計


世界安全基準
IEC61010 遵守

電磁式フタロック
インバランス検出機能
60dB以下での静音運転



■ 本体仕様

型番	Z207A
最高回転数	6,800 rpm
回転数設定	200~6,800 rpm (10rpm単位)
最大遠心加速度	4,445×g
タイマー設定	10秒~99時間59分 ホールド機能、クイックボタン付き
寸法	W280 × D350 × H240 (mm)
重量	8 kg
表示	回転数(遠心加速度)・タイマー・加減速モード
安全機能	電気プロテクト、インバランス検出、電磁フタロック、モータ保護(過電流)
必要電源	AC 100V 50/60Hz 1.6A
セット価格	¥380,000 (税抜) ロータ付属

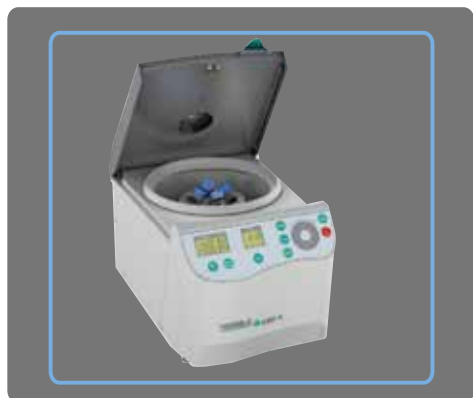

- 少数のサンプルの遠心に適した、コンパクトサイズ。研究分野、検査分野に最適です。
- 15ml チューブ×8本、採血チューブが積載できるアングルロータ、または、50mlと15mlのチューブが積載できるアングルロータが付属されています。用途に合わせてお選びいただけます。
- 操作はタッチするだけの最新コントロールパネル。手袋のままでも操作可能。(タッチダイヤル、各キー)
- シンプルで、卓上が明るくなるデザインが親しまれています。

その他機能

- 99メモリ
- 10段階加減速モード
- スリープ・モード機能
- ホールド、フラッシュ機能
- エルゴノミクス・タッチ操作
- インバランス検出
- rpm/RCF 切替表示、設定
- 電磁式フタロック

2種類のロータからお選びいただけます。

パッケージ：01 アングルロータ 221.57 V01


15ml チューブ×8本
(コニカルチューブ×4本)
角度 33°

最高回転数： 6,800rpm
最大遠心加速度： 4,445×g
回転半径： 8.6cm
最大チューブ径： 17mm

221.57 V01 用別売アダプタ

アダプタ型番	チューブ容量	チューブサイズ	入数	価格 (税抜)
701.011	7.0ml	φ13.5×95/115mm	2	¥20,000
701.012	5.0ml	φ13.5×62/90mm	2	¥20,000
701.015	1.5/2.0ml	φ11×42mm	6	¥28,000
701.020	採血管	L65-75mm	2	¥14,000

パッケージ：04 アングルロータ 221.86 V01


50ml チューブ (コニカ、ラウド細)×4本、
または 15ml チューブ (コニカ、ラウド細)
×4本
角度 30°

50ml、15ml、どちらのチューブも
搭載できます。
最高回転数： 6,800rpm
最大遠心加速度： 4,394×g
回転半径： 8.5cm
最大チューブ径： 29/17mm




製造元：HERMLE 社 ドイツの科学機器メーカー
ヘルムレ社は、1956年以來60年以上に
わたり、HERMLE 遠心機を世界中で販売
しています。


安全上に関するご注意

●正しく安全にご使用頂く為、必ずご使用前に
製品の「取扱説明書」をお読みの上ご使用下さい。

- このカタログに掲載している製品は改良の為、価格や仕様、
外観などお断り無く変更する事がありますのでご了承下さい。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。


株式会社 佐久間製作所

〒144-0045 東京都大田区南六郷 3-16-27
TEL : (03)3733-9751 FAX : (03)3731-1257
URL : <http://www.sakumajp.com>